



**SURGICAL
INNOVATIONS**

HAND & FUSS

Einfach. Innovativ.





Z-Staples

Internationale Patente **EU/US/CHN**



Z-SnapOff Schrauben

(Kompressionsschraube)

Internationale Patente **EU/US/CHN**



Z-Kompressionsschrauben kanuliert / ohne Kopf

(Doppelkompression / Rundkopf Kompression / Neutralisation)



Z-Speed Drive System Technologie

Internationale Patente **EU/US/CHN**



- › Unzählige Alleinstellungsmerkmale – Produkte haben deutliche Vorteile im Marketing & Vertrieb
- › “Gebrauchsfertige” sterile Implantate mit 7 Jahren Haltbarkeitsdauer
- › Volle Rückverfolgbarkeit nach UDI
- › Wiederverwendbare Instrumente verfügbar



**SURGICAL
INNOVATIONS**


Z-SnapOff Schrauben

Einfach. Innovativ.



Merkmale

Z-SnapOff
Schrauben
Kompression

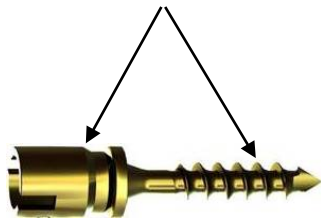



Ø2mm

Indikationen

- › Die Z-SnapOff Schrauben sind für die Fixierung von Knochenbrüchen oder Knochenrekonstruktionen vorgesehen. Als Beispiel: Fixierung von Knochenfragmenten oder kleine Knochenbrüche; Weil Osteotomie; Monokortikale Fixation; Osteotomien und Frakturen Fixierung in Hand und Fuß

Z-SnapOff Schrauben mit Z-Screw Navigator oder Z-Speed Drive System

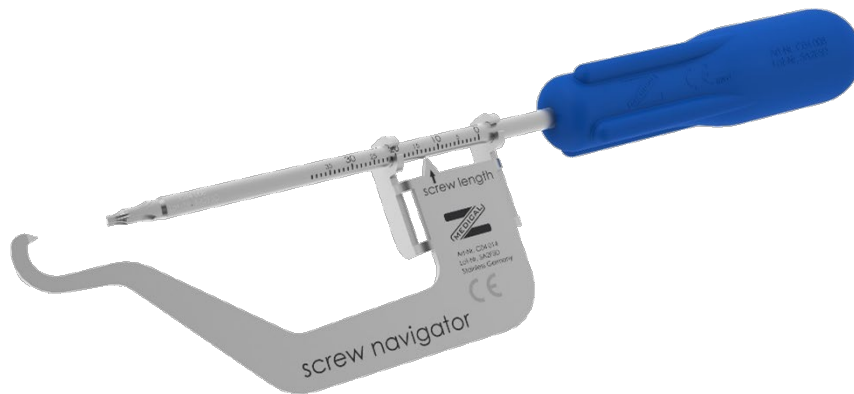

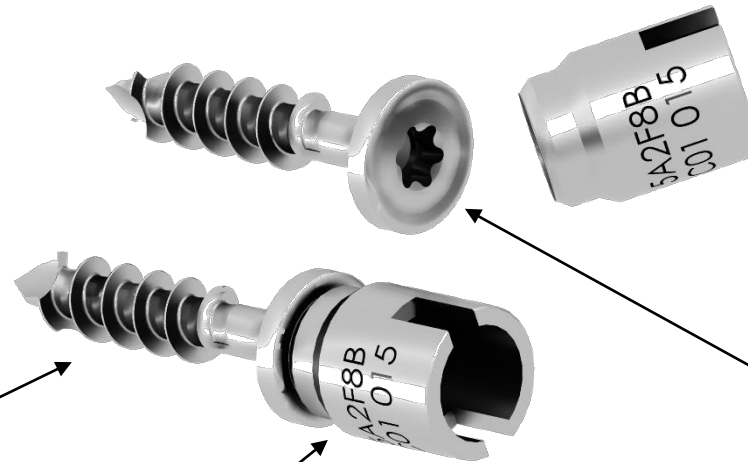

- › Trokar Spitze ermöglicht multidirektionales Eindrehen
- › selbstbohrend,
- › selbstschneidend,
- › Gewindeflanken für optimierte Kompression

- › Innovative und patentierte SnapOff-Verbindung Schraube/Schaft
- › höhere Seitenstabilität ermöglicht ein sicheres Einbringen
- › gratfreies Abbrechen des Halteschaftes

- › selbsthaltender Antrieb für optimale Kraftübertragung bis zur Endposition



C01 015 Ø2 11mm



C01 017 Ø2 13mm



C01 016 Ø2 12mm



C01 018 Ø2 14mm

- › Implantate steril verpackt
- › Titanlegierung



STERILE

+



Wiederverwendbare Instrumente
für alle Schraubentypen verfügbar!

=

READY TO USE

Wiederverwendbare Instrumente verfügbar!



Z-Schraubendreher SnapOff
(zum Eindrehen mit Chirurgiemaschine)



Z-Screw Navigator
(Schraubenplatzierung und Längenbestimmung)



Z-Screw Driver
(direktes Eindrehen der Schraube)



Z-Screw Navigator

Z-Screw Driver



Z-Speed Drive System „Manuell“

- Schraubenplatzierung
- Bestimmung der Schraubenlänge
- Eindrehen der Schraube



Z-Schraubendreher
SnapOff

Z-Speed Drive System „mit Chirurgiemaschine“

- Eindrehend der Schraube “SnapOff”



Merkmale

- › Patentierte Z-SnapOff Technik
(optimale Seitenstabilität gegenüber herkömmlicher snap-off)
- › Z-Speed Drive System zum Eindrehen mit Chirurgiemaschine
- › Z-Screw Navigator für Schraubenplatzierung verfügbar!
- › Sterile Implantate, 7 Jahren Haltbarkeitsdauer
- › Wiederverwendbare Instrumente



**SURGICAL
INNOVATIONS**

Z-Medical® GmbH + Co. KG

Gänsäcker 38, 78532 Tuttlingen
Germany

Telefon: +49 (0) 7462 94 55 40

Fax: +49 (0) 7462 94 55 49

E-Mail: info@z-medical.de

Website: www.z-medical.de

Folgen Sie uns auf:

